


حزام وقف النزيف - غليا - تعليمات الإستخدام

تحضير حزام وقف النزيف

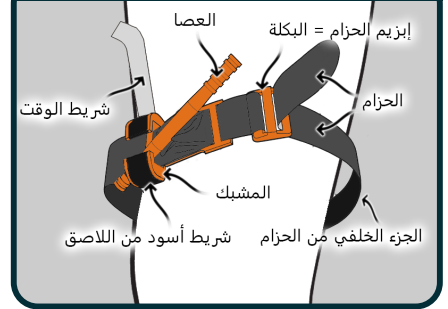

توقع أن الحزام جاهز بالفعل بأن يكون الحزام داخل إبزيم الحزام (البكلة) كما في الصورة

لو لم يكن جاهز، مرر طرف الحزام من خلال تجويف إبزيم الحزام (البكلة). ثم إبدأ بالخطوة الأولى

الخطوة الأولى



ضع حزام وقف النزيف حول الطرف على مسافة ٧.٥ سم فوق منطقة النزيف.

ضع الحزام على الجلد مباشرة لو استطعت.


الخطوة الثانية



اسحب الحزام بإحكام وأعد إلصاقه على نفسه حول الطرف.

لا تمرر الحزام بين طرفي المشبك في هذه الخطوة.


الخطوة الثالثة

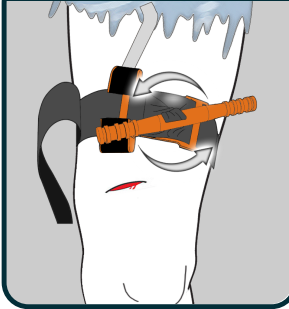

اقتل [لف] العصا ثلاث دورات [٥٤٠ درجة] في نفس الإتجاه.


إذا لم تتم السيطرة على النزيف استمر في الخطوات الباقية (خطوة ٤ & ٥) ثم استعمل حزام وقف نزيف آخر في المنطقة العلوية من الحزام الأول.

الخطوة الرابعة

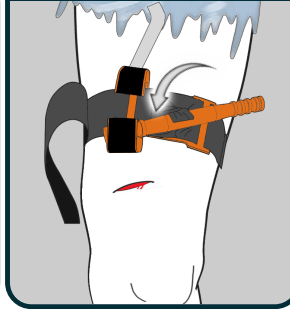

ثبت العصا بإحدى طرفي المشبك ليثبت مكانه.

الخطوة الخامسة

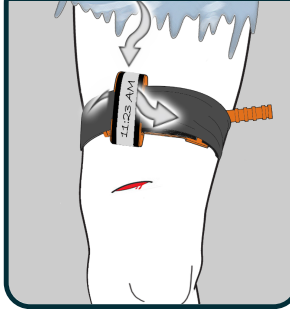

مرر الحزام بين طرفي المشبك وفوق العصا.

أمته بشريط الوقت الأبيض. مرر شريط الوقت الأبيض فوق الحزام ثم الصقه بطرف المشبك الآخر.